




# SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EM CAIXA PLÁSTICA

## REFRIGERAÇÃO - TECLAGO

- ⇒ Fabricado em plástico de engenharia, garantindo alta durabilidade;
- ⇒ Reservatório disponível na versão de 50 litros e 100 litros;
- ⇒ Possui rodízios para facilitar a movimentação;
- ⇒ Reservatório fabricado com alças laterais para facilitar o transporte;
- ⇒ Ideal para embutidoras, lixadeiras e cortadoras;
- ⇒ Alimentação elétrica feita através de plug de engate rápido, garantindo mais praticidade e segurança;
- ⇒ Garantia de 12 (doze) meses.

### Especificações:

- Sistema de refrigeração composto por reservatório fabricado em plástico de engenharia injetado com excelente resistência a corrosão, e bomba de circulação com potência de 0,50 cv - 370W proporcionando alto desempenho com vazão de 138 litros por minuto.
- A bomba de circulação possui válvula de controle de vazão e sistema de alimentação elétrica por plug macho de engate rápido que se conecta ao plug fêmea da Cortadora. Disponível nas tensões: 220v monofásico, 220v trifásico, 380v e 440v trifásico.
- O reservatório possui sistema de Chicanes que retém os resíduos sólidos da descarga de retorno da cortadora em um dos lados, desta forma, o líquido conduzido para o corte se mantém limpo e sem impurezas e detritos pesados.
- O sistema de refrigeração Teclago, também tem a versão que pode ser usada em Embutidoras Metalográficas, Lixadeiras e Cortadoras.

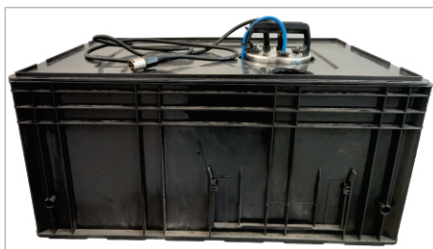


1º - Encha o reservatório com água e líquido refrigerante (1,25L de líquido refrigerante para cada 50 L de água).

2º - Conecte a mangueira de retorno da máquina no reservatório.

3º - Conecte a mangueira de entrada de líquido refrigerante da máquina na saída de líquido da bomba, mantendo o registro na posição "ABERTO".



4º - Conecte o cabo de alimentação da bomba no Plug da máquina.

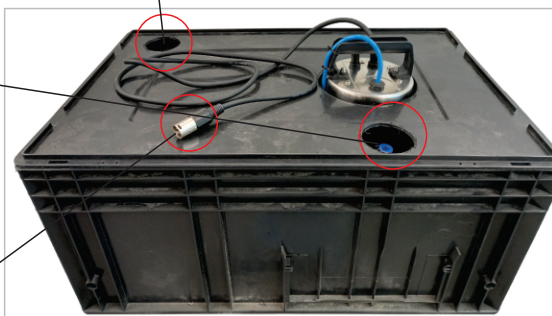

\*Disponível também em 220v monofásico, indicado para Embutidoras Metalográficas

\*Fotos apenas ilustrativas, a configuração do equipamento pode sofrer algumas alterações sem comprometer seu funcionamento.



Este equipamento atende as normas:



### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPRIMENTO	590 mm
LARGURA	390 mm
ALTURA	110 mm
PESO	8 kg
TENSÃO	*220/380/440 V Trifásico 60 Hz
POTÊNCIA	1/2 CV - 370W
VAZÃO	133 L/m

Tel: (11) 4158-9225 / (11) 4158-4225  
Email: [teclago@teclago.com.br](mailto:teclago@teclago.com.br)

[www.teclago.com.br](http://www.teclago.com.br)